



Einweg-Symphony®-Pumpsets

Mehr Milch, mehr Komfort, klinisch nachgewiesen

Einweg-Symphony®-Pumpsets von Medela mit den innovativen ovalen Brusthauben mit einem weiteren Öffnungswinkel von 105° ermöglichen es klinisch nachgewiesen mehr Milch zu gewinnen und bieten Müttern mehr Komfort.¹

Im Vergleich zum Standard-Design können Mütter bei Verwendung der ovalen Brusthaube mit 105°-Winkel in 15 Minuten bis zu 11 % mehr Milch abpumpen.¹ Darüber hinaus bewirken sie eine um bis zu 4 % bessere Brustentleerung¹ – ein entscheidendes Kriterium, da zur Aufrechterhaltung der Milchproduktion eine effektive Entleerung der Brust essenziell ist.² Dies erhöht die Chancen, dass Säuglinge ausschließlich mit Muttermilch ernährt werden können.



Nach 15 Minuten
doppelseitigem Abpumpen:

11% mehr Milch¹

4% bessere
Brustentleerung¹



Jetzt in 5 Größen verfügbar:

18
XS

21
S

24
M

27
L

30
XL

- Abnehmbare Haube für leichtere Handhabung
- Keine Reinigung vor der ersten Verwendung nötig
- Zusammen mit der Milchpumpe Symphony® als Komplettsystem verifiziert und validiert
- Verfügbar als Ready-to-Use Eintages-Pumpset und steriles Einweg-Pumpset



Wir empfehlen doppelseitiges Abpumpen! Doppelseitiges Abpumpen ermöglicht Müttern, **in der Hälfte der Zeit 18 %** mehr Milch mit einem höheren Energiegehalt abzupumpen.^{**3}

Innovative Brusthaube – auf Grundlage fundierter Forschung und durch klinische Studien belegt.

Forschungen zeigten, dass bei abpumpenden Müttern eine Diskrepanz zwischen der Brustform und der Form einer runden Standard-Brusthaube mit 90°-Winkel besteht. Es wurden Kontaktpunkte am Rand der Haube identifiziert, die möglicherweise zu einer lokalen Kompression des Brustgewebes führen. Wird dieses Gewebe komprimiert, kann der Milchfluss aus den Milchkanälen verringert sein.⁴ Unter Verwendung von Medelas einzigartiger und weltweit größter Datenbank an 3D-Scans unterschiedlicher laktierender Brüste wurde beschlossen, größere Öffnungswinkel zu testen. Es stellte sich heraus, dass ein Winkel von 105° den Konturen einer laktierenden Brust besser entspricht,⁵ unabhängig von Form oder Größe.

Der weitere Öffnungswinkel führt zur Reduktion der Kompression und sorgt dafür, dass die Mamille weiter in den Tunnel hineinreicht. Hierdurch soll sich nicht nur das Abpumperlebnis für Mütter angenehmer gestalten, sondern auch der Milchfluss verbessert werden.^{4,5} Zusätzlich zum größeren Winkel wurde der Haube eine ovale Form gegeben, um eine gute Abdichtung und Passform für das breite Spektrum laktierender Brüste zu unterstützen. Die Wirksamkeit der ovalen 105°-Brusthaube – mehr Milch, mehr Komfort – konnte anschließend in klinischen Studien belegt werden.¹




Ready-to-Use Eintages-Symphony®-Pumpsets

- Hygienisch einwandfrei⁶
- Für den Gebrauch durch nur eine Anwender:in
- Max. 8 Abpumpsitzungen innerhalb von 24 Stunden




Sterile Einweg-Symphony®-Pumpsets

- EO-sterilisiert
- Für den Einmalgebrauch

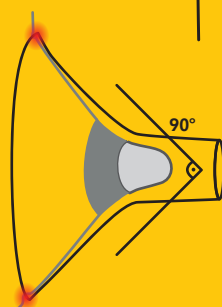

90° Öffnungswinkel

Kann zur Kompression des Brustgewebes am Rand der Brusthaube führen.⁴

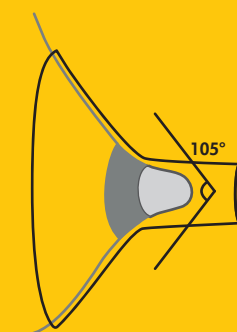

105° Öffnungswinkel

Entspricht den Konturen laktierender Brüste und reduziert Kompressionspunkte.⁵

Ready-to-Use Eintages-Symphony®-Pumpset

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Stk./Karton	GTIN Versandcode	Größe des Versandkartons
101047648	Ready-to-Use Eintages-Symphony®-Pumpset, Größe XS	18mm	30	7612367092548	38 x 25.3 x 20.8 cm
101044745	Ready-to-Use Eintages-Symphony®-Pumpset, Größe S	21mm	30	7612367089104	38 x 25.3 x 20.8 cm
008.0276	Ready-to-Use Eintages-Symphony®-Pumpset, Größe M	24mm	30	7612367082990	38 x 25.3 x 20.8 cm
008.0277	Ready-to-Use Eintages-Symphony®-Pumpset, Größe L	27mm	30	7612367047876	38 x 25.3 x 23.4 cm
008.0278	Ready-to-Use Eintages-Symphony®-Pumpset, Größe XL	30mm	30	7612367047883	38 x 25.3 x 23.4 cm

Sterile Einweg-Symphony®-Pumpsets

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Stk./Karton	GTIN Versandcode	Größe des Versandkartons
101047650	Steriles Einweg-Symphony®-Pumpset, Größe XS	18mm	30	7612367092562	38 x 25.3 x 20.8 cm
101044749	Steriles Einweg-Symphony®-Pumpset, Größe S	21mm	30	7612367089128	38 x 25.3 x 20.8 cm
008.0397	Steriles Einweg-Symphony®-Pumpset, Größe M	24mm	30	7612367084635	38 x 25.3 x 20.8 cm
008.0398	Steriles Einweg-Symphony®-Pumpset, Größe L	27mm	30	7612367047906	38 x 25.3 x 23.4 cm
008.0399	Steriles Einweg-Symphony®-Pumpset, Größe XL	30mm	30	7612367047913	38 x 25.3 x 23.4 cm

* Hauben-Öffnungswinkel von 105° im Vergleich zu 90° ** Im Vergleich zu sequenziellem einseitigem Abpumpen

Literaturhinweise: 1 Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567. 2 Kent JC et al. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 41(1):114-121. 3 Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442-447. 4 Muther M et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28. 5 Schlienger A et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29. 6 German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for Ready-to-Use Products (2014)