



Sets jetables pour tire-lait Symphony®

Plus de lait, plus de confort, cliniquement prouvé

Les sets jetables pour tire-lait pour Symphony® de Medela, dotés de tétérrelles ovales innovantes avec un angle d'ouverture plus large de 105°, sont cliniquement prouvés pour permettre l'expression d'une plus grande quantité de lait et offrir un plus grand confort aux mères.¹

Les mères qui utilisent des tétérrelles à 105° expriment 11 % de lait en plus après 15 minutes par rapport à la tétérelle standard.¹ Elles ont également constaté une amélioration de 4 % du drainage du sein¹, ce qui est significatif, car un principe clé pour maintenir la production de lait est de drainer le sein efficacement.² Ceci améliore les chances des nourrissons de bénéficier d'une alimentation exclusivement au lait maternel.



Après 15 minutes

de double expression :

11% de lait en plus*¹

4% supplémentaires de drainage du sein*¹



Désormais disponible dans 5 tailles différentes :

18

XS

21

S

24

M

27

L

30

XL

- Tétérelle amovible pour une plus grande facilité d'utilisation
- Aucun nettoyage nécessaire avant la première utilisation
- Vérifié et validé comme étant un système complet avec le tire-lait Symphony®
- Disponible sous forme de set Ready-to-Use One-Day et set à usage unique pour tire-lait



Nous recommandons la double expression ! La double expression permet aux mères d'exprimer **18 % de lait en plus**, avec un contenu énergétique plus élevé, et ce en deux fois moins de temps.^{**3}

Innovation en matière de tétérrelle – fondée sur une recherche rigoureuse et prouvée par des études cliniques.

En observant l'expression de lait chez les mères, les chercheurs de Medela ont remarqué une différence entre la forme du sein et la forme d'une tétérrelle ronde, à angle standard de 90°. Ils ont découvert des points de contact au niveau du bord extérieur qui pourraient entraîner une compression localisée du tissu mammaire, réduisant potentiellement l'écoulement de lait dans les canaux superficiels.⁴

En utilisant la base de données unique de Medela, qui contient des scans 3D de différents seins allaitants, la plus grande base de données au monde, les chercheurs ont décidé de tester des brides à angle plus large. Ils ont constaté qu'un angle de 105° épousait mieux les contours d'un sein allaitant,⁵ indépendamment de sa forme ou de sa taille. Les points de compression ont été réduits, le mamelon a été placé plus loin dans l'embout, ce qui suggère une expérience d'allaitement plus confortable pour les mères et la possibilité d'un meilleur écoulement de lait.^{4,5} Outre l'angle élargi, la forme de la tétérrelle a été modifiée pour devenir ovale, afin d'assurer une bonne étanchéité et de s'adapter à une large palette de seins allaitants. Des études cliniques ont ensuite prouvé l'efficacité de la tétérrelle ovale 105°, avec plus de lait, plus de confort.¹





Sets pour tire-lait One-Day Ready-to-Use

- Hygiéniquement sûr⁶
- Pour utilisation par une seule mère
- Maximum 8 séances d'expression en 24 heures




Sets à usage unique pour tire-lait stériles

- Stérilisé à l'OE
- Pour usage unique

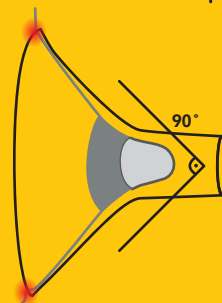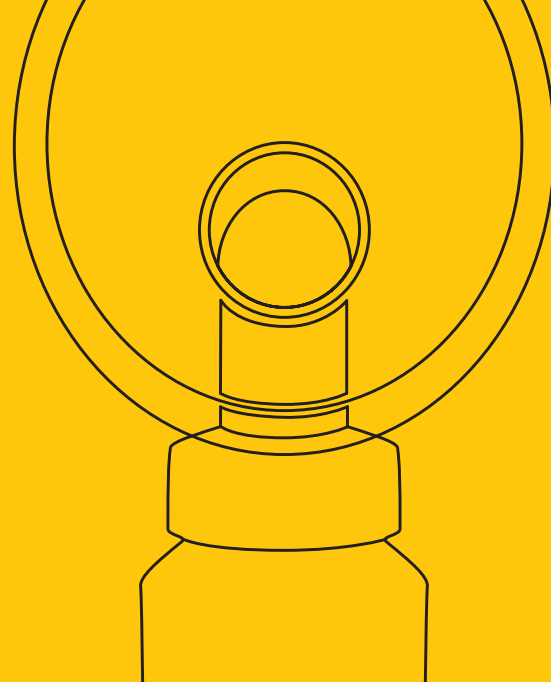

90° Angle d'ouverture

Peut entraîner une compression du tissu mammaire au niveau du bord de la tétérrelle.⁴

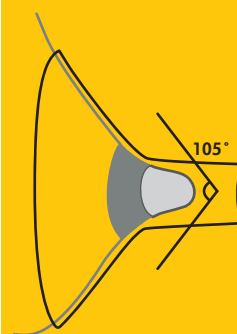

105° Angle d'ouverture

S'adapte aux contours du sein allaitant et réduit les points de compression.⁵

Sets pour tire-lait One-Day Symphony Ready-to-Use

Référence	Nom	Taille	Quantité/ carton	GTIN expéditeur	Taille expéditeur
101047648	Set pour tire-lait One-Day Symphony Ready-to-Use, taille XS	18mm	30	7612367092548	38 x 25.3 x 20.8cm
101044745	Set pour tire-lait One-Day Symphony Ready-to-Use, taille S	21mm	30	7612367089104	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0276	Set pour tire-lait One-Day Symphony Ready-to-Use, taille M	24mm	30	7612367082990	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0277	Set pour tire-lait One-Day Symphony Ready-to-Use, taille L	27mm	30	7612367047876	38 x 25.3 x 23.4cm
008.0278	Set pour tire-lait One-Day Symphony Ready-to-Use, taille XL	30mm	30	7612367047883	38 x 25.3 x 23.4cm

Sets stériles à usage unique pour tire-lait Symphony

Référence	Nom	Taille	Quantité/ carton	GTIN expéditeur	Taille expéditeur
101047650	Set stérile à usage unique pour tire-lait Symphony, taille XS	18mm	30	7612367092562	38 x 25.3 x 20.8cm
101044749	Set stérile à usage unique pour tire-lait Symphony, taille S	21mm	30	7612367089128	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0397	Set stérile à usage unique pour tire-lait Symphony, taille M	24mm	30	7612367084635	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0398	Set stérile à usage unique pour tire-lait Symphony, taille L	27mm	30	7612367047906	38 x 25.3 x 23.4cm
008.0399	Set stérile à usage unique pour tire-lait Symphony, taille XL	30mm	30	7612367047913	38 x 25.3 x 23.4cm

* 105° vs 90° d'angle d'ouverture de la tétérrelle ** Comparé à la simple expression

Références: 1 Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567. 2 Kent JC et al. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 41(1):114-121. 3 Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442-447. 4 Muther M et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28. 5 Schlienger A et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29. 6 German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for Ready-to-Use Products (2014)