



Set monouso e giornalieri per tiralatte Symphony®

Più latte, più comfort, clinicamente provato

I set per tiralatte monouso e giornalieri di Medela per Symphony®, caratterizzati dalle coppe per il seno dalla innovativa forma ovale con un angolo di apertura di 105° – più ampio rispetto alle coppe tradizionali – sono clinicamente testati per consentire l'estrazione di una maggiore quantità di latte e offrire un maggiore comfort alle madri.¹

Le madri che effettuano l'estrazione con le coppe per il seno dal design ovale e angolo di 105° ottengono fino all'11% di latte in più dopo 15 minuti rispetto alle estrazioni effettuate con coppe con design standard.¹ Inoltre è stato dimostrato un miglioramento del 4 % nel drenaggio del seno¹ – un dato significativo, poiché drenare efficacemente il seno risulta essere uno dei fattori determinanti per mantenere la produzione di latte.² Ciò aumenta le possibilità dei neonati di ricevere un'alimentazione esclusivamente a base di latte umano.



Disponibile in diverse misure:

18 XS **21** S **24** M **27** L **30** XL

- Coppa rimovibile per agevolare l'uso
- Non è necessaria la pulizia prima del primo utilizzo
- Verificato e convalidato come sistema completo con il tiralatte Symphony®
- Disponibile come set Ready-to-Use giornaliero e set sterile monouso

 Dopo 15 minuti di estrazione doppia:

11% di latte in più*¹

4% in più di drenaggio del seno*¹



Noi consigliamo l'estrazione doppia L'estrazione doppia permette alle madri di estrarre il 18% di latte in più con un contenuto energetico più elevato, il tutto in metà tempo.**³

Innovazione della coppa per il seno – basata su una ricerca rigorosa e dimostrata da studi clinici.

Osservando le madri durante l'estrazione, i ricercatori di Medela hanno notato una discrepanza tra la forma del seno e la forma di una coppa per il seno rotonda, con il tradizionale angolo di 90°. Hanno scoperto dei punti di contatto sul bordo esterno che potrebbero causare una compressione localizzata del tessuto mammario, riducendo potenzialmente il flusso del latte a causa della compressione dei dotti galattofori superficiali.⁴

Utilizzando l'esclusivo database di Medela di scansioni 3D di diversi seni durante l'allattamento – il più grande al mondo – i ricercatori hanno deciso di testare flange più larghe. Hanno scoperto che l'angolo di 105° si adattava meglio ai contorni di un seno durante l'allattamento⁵, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni. I punti di compressione sono stati ridotti, il capezzolo è stato posizionato più avanti nel condotto, suggerendo un'esperienza di estrazione più confortevole per le madri e la possibilità di migliorare il flusso del latte.^{4,5}

Oltre all'angolo più ampio, la forma della coppa è stata modificata in ovale, per favorire una buona tenuta e l'adattamento a un'ampia gamma di seni durante l'allattamento. Studi clinici hanno poi dimostrato l'efficacia della coppa per il seno ovale con angolo di 105°: più latte, più comfort.¹




Set giornaliero Ready-to-Use per tiralatte

- Igienicamente sicuro⁶
- Per l'utilizzo da parte di una sola madre
- Max. 8 sessioni di estrazione nell'arco di 24 ore




Set monouso sterile per tiralatte

- Sterilizzato con EO
- Monouso

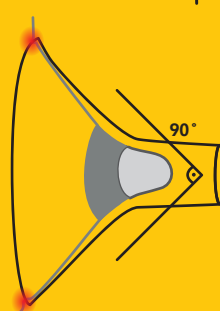

90° Angolo di apertura di 90°

Può provocare una compressione del tessuto mammario in corrispondenza del bordo della coppa per il seno.⁴

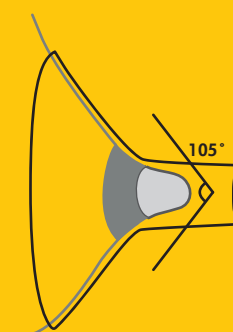

105° Angolo di apertura di 105°

Si adatta ai contorni del seno durante l'allattamento e riduce i punti di compressione.⁵

Set giornaliero Ready-to-Use per tiralatte Symphony

Codice articolo	Nome	Misura	Quantità	GTIN catola spedizione	Dimensioni scatola spedizione
101047648	Set giornaliero Ready-to-Use per tiralatte Symphony misura XS	18mm	30	7612367092548	38 x 25.3 x 20.8cm
101044745	Set giornaliero Ready-to-Use per tiralatte Symphony misura S	21mm	30	7612367089104	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0276	Set giornaliero Ready-to-Use per tiralatte Symphony misura M	24mm	30	7612367082990	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0277	Set giornaliero Ready-to-Use per tiralatte Symphony misura L	27mm	30	7612367047876	38 x 25.3 x 23.4cm
008.0278	Set giornaliero Ready-to-Use per tiralatte Symphony misura XL	30mm	30	7612367047883	38 x 25.3 x 23.4cm

Set sterile monouso per tiralatte Symphony

Codice articolo	Nome	Misura	Quantità	GTIN catola spedizione	Dimensioni scatola spedizione
101047650	Set sterile monouso per tiralatte Symphony misura XS	18mm	30	7612367092562	38 x 25.3 x 20.8cm
101044749	Set sterile monouso per tiralatte Symphony misura S	21mm	30	7612367089128	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0397	Set sterile monouso per tiralatte Symphony misura M	24mm	30	7612367084635	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0398	Set sterile monouso per tiralatte Symphony misura L	27mm	30	7612367047906	38 x 25.3 x 23.4cm
008.0399	Set sterile monouso per tiralatte Symphony misura XL	30mm	30	7612367047913	38 x 25.3 x 23.4cm

* Angolo di apertura della coppa di 105° rispetto a 90° ** Rispetto all'estrazione singola sequenziale

Bibliografia: 1 Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567. 2 Kent JC et al. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 41(1):114-121. 3 Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442-447. 4 Muther M et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28. 5 Schlienger A et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29. 6 German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for Ready-to-Use Products (2014)