

Symphony® Disposable afkolfsets

Meer melk,
meer comfort,
klinisch bewezen



Medela's disposable afkolfsets voor Symphony® zijn voorzien van innovatieve, ovale borstschilden met een bredere openingshoek van 105°. Het is klinisch bewezen dat ze de levering van meer melk mogelijk maken en meer comfort bieden aan moeders. *1

Moeders die afkolven met de ovale borstschilden met 105° opening verkrijgen 11% meer melk na 15 minuten, vergeleken met het standaard ontwerp.¹ Ze vertoonden ook 4% betere lediging van de borst – belangrijk, aangezien het goed leegmaken van de borst een belangrijk principe is voor het in stand houden van de melkproductie.²

Dit verhoogt de kans dat baby's exclusief gevoed kunnen worden met moedermelk.



• Nu verkrijgbaar in 4 maten:

S	M	L	XL
21 mm	24 mm	27 mm	30 mm

- Afneembaar schild voor gebruiksgemak
- Geen reiniging nodig vóór het eerste gebruik
- Geverifieerd en gevalideerd als een compleet systeem met Symphony®
- Beschikbaar als Ready-to-Use afkolfset voor 8 afkolfsessies of één dag.

Na 15 min. dubbel afkolven:
11% meer melk¹
4% betere lediging van de borst¹



We raden dubbel afkolven aan!

Met dubbel afkolven kunnen moeders **18% meer melk** met een hoger energiegehalte afkolven, en dat allemaal in de helft van de tijd.^{**3}

INNOVATIE IN BORSTSCHILDEN – GEBASEERD OP GRONDIG ONDERZOEK EN BEWEZEN IN KLINISCHE STUDIES



Door het observeren van kolvende moeders merkten de onderzoekers van Medela een verschil op tussen de vorm van de borst en de vorm van een rond, standaard borstschild met een hoek van 90°. Ze ontdekten contactpunten aan de rand, wat mogelijk leidde tot plaatselijke compressie van het borstweefsel.⁴ Als dit weefsel wordt samengedrukt, kan dit de melkstroom uit de melkkanalen verminderen.

De onderzoekers besloten om borstschilden met een bredere hoek te testen met behulp van Medela's unieke database met 3D scans van verschillende lacterende borsten – de grootste ter wereld. Ze ontdekten dat een borstschild van 105° beter overeen kwam met de contouren van een lacterende borst, ongeacht de vorm of maat ervan. Het aantal compressiepunten werd verminderd en de tepel werd verder in de schacht geplaatst, wat duidt op een comfortabelere kolfervaring voor moeders en een verbeterde melkstroom mogelijk maakt.^{4,5} Naast de vergrote hoek, is de vorm van het schild aangepast naar ovaal, ter ondersteuning van een goede aansluiting en pasvorm voor het brede scala aan lacterende borsten. Klinische studies hebben later de effectiviteit van het ovale borstschild van 105° bewezen: meer melk, meer comfort.^{1,6}




Disposable afkolfsets voor één dag

- Hygiënisch veilig⁷
- Voor gebruik door één moeder
- Maximaal 8 kolfsessies binnen 24 uur

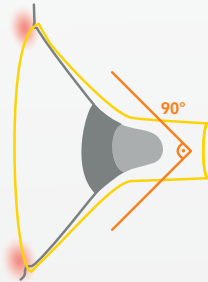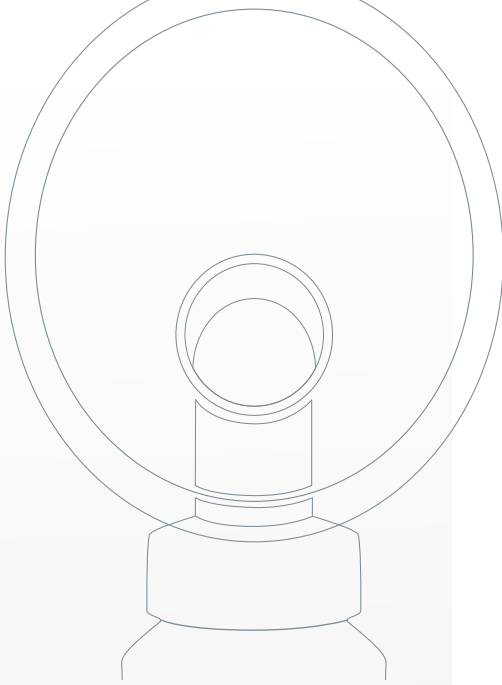

90° Openingshoek
Kan resulteren in het samendrukken van het borstweefsel aan de rand van het borstschild.⁴

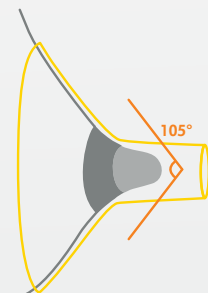

105° Openingshoek
Komt overeen met de contouren van lacterende borsten en vermindert het aantal compressiepunten.⁵

Ready-to-Use Symphony-afkolfsets voor één dag					
Artikelnummer	Naam	Maat	Aantal/ eenheid	GTIN verpakkingseenheid	Afmetingen verpakkingseenheid
101044745	Ready-to-Use Symphony-afkolfset voor één dag, maat S	21 mm	30	7612367089104	38 x 25,3 x 20,8 cm
008.0276	Ready-to-Use Symphony-afkolfset voor één dag, maat M	24 mm	30	7612367082990	38 x 25,3 x 20,8 cm
008.0277	Ready-to-Use Symphony-afkolfset voor één dag, maat L	27 mm	30	7612367047876	38 x 25,3 x 23,4 cm
008.0278	Ready-to-Use Symphony-afkolfset voor één dag, maat XL	30 mm	30	7612367047883	38 x 25,3 x 23,4 cm

Literatuur
* 105° vs 90° openingshoek schild ** Vergeleken met herhaaldelijk enkelvoudig afkolven
1 Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567 **2** Kent JC et al. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 41(1):114-121 **3** Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442-447 **4** Muther M et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28 **5** Schlienger A et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29. **6** ClinicalTrials.gov; 2016. Beschikbaar op: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02719548> **7** Duits adviescentrum voor ziekenhuisepidemiologie en infectiecontrole (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusie van de risicobeoordeling van de productiemethode voor gebruiksklare producten (2014)