



Kits de extração descartáveis Symphony®

Mais leite, mais conforto, comprovado clinicamente

Os kits de extração descartáveis da Medela para a Symphony® e os seus inovadores funis ovais com um ângulo de abertura amplo de 105° permitem, de forma clinicamente comprovada, a extração de mais leite e proporcionam mais conforto às mães.¹

As mães que utilizam funis com design oval de 105° extraem mais 11% de leite após 15 minutos, em comparação com o design padrão.¹ Verificou-se também uma melhoria de 4% na drenagem da mama¹ – um fator muito significativo, dado que a drenagem eficaz da mama é essencial para manter a produção de leite.² Desta forma, aumentam as probabilidades de os bebés receberem uma dieta exclusiva de leite humano.



Agora disponível em 5 tamanhos:

18	21	24	27	30
XS	S	M	L	XL

- Funil descartável para facilitar a utilização
- Não necessita de limpeza antes da primeira utilização
- Verificado e validado como sistema completo com o extrator Symphony®
- Disponível como kit de extração de um dia Ready-to-Use ou de utilização única estéril

Após 15 minutos

de extração dupla:

Mais **11%** de leite*¹

Mais **4%** de drenagem da mama*¹



Recomendamos a extração dupla. A extração dupla permite que as mães extraiam mais 18% de leite com um valor energético mais elevado, na metade do tempo.^{**3}

Funil inovador — baseado numa investigação rigorosa e comprovado em estudos clínicos.

Ao observarem mães durante a extração de leite, os investigadores da Medela constataram uma discrepância entre a forma da mama e a de um funil redondo, com um ângulo padrão de 90°. Identificaram pontos de contacto no rebordo exterior que podiam provocar compressão localizada do tecido mamário, reduzindo potencialmente o fluxo de leite devido à compressão dos ductos galactóforos superficiais.⁴

Recorrendo à base de dados exclusiva da Medela, composta por digitalizações 3D de várias mamas lactantes – a maior do mundo –, os investigadores decidiram testar com ângulos mais amplos. Descobriram que o ângulo de 105° se adapta melhor aos contornos de uma mama lactante,⁵ independentemente da sua forma ou tamanho. Os pontos de compressão foram reduzidos, o mamilo ficou melhor posicionado no interior do canal, sugerindo uma experiência de extração mais confortável para as mães e a possibilidade de um melhor fluxo de leite.^{4,5}

Para além do ângulo mais amplo, a forma do funil passou a ser oval, garantindo uma boa vedação e adaptação aos diferentes tipos de mamas lactantes. Estudos clínicos comprovaram mais tarde a eficácia do funil oval de 105° – mais leite e maior conforto.¹





Kit de extração de um dia Ready-to-Use

- Higienicamente seguro⁶
- Concebido para utilização por uma única mãe
- Máx. de 8 sessões de extração em 24 horas




Kit de extração de utilização única estéril

- Esterilizado com gás de OE
- De utilização única

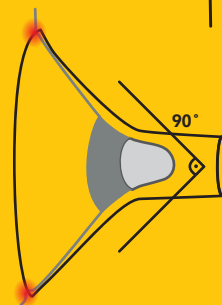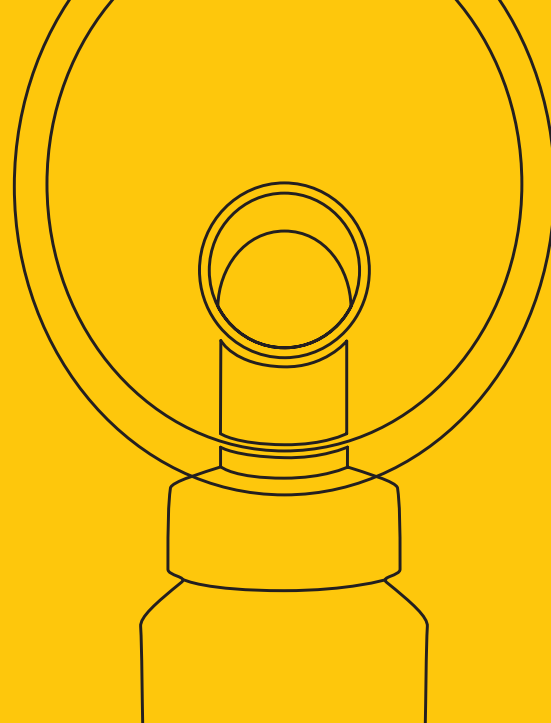

90° Ângulo de abertura

Pode provocar compressão do tecido mamário no rebordo do funil.⁴

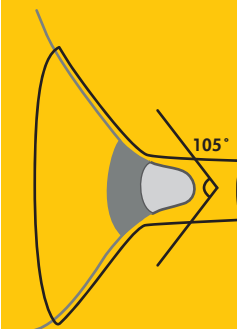

105° Ângulo de abertura

Adapta-se ao contorno da mama lactante e reduz os pontos de compressão.⁵

Kits de extração de um dia Symphony Ready-to-Use

Referência	Artigo	Tamanho	Quant./Caixa	GTIN	Dimensões
101047648	Kit de extração de um dia Symphony - Ready-to-Use - tamanho XS	18mm	30	7612367092548	38 x 25.3 x 20.8cm
101044745	Kit de extração de um dia Symphony - Ready-to-Use - tamanho S	21mm	30	7612367089104	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0276	Kit de extração de um dia Symphony - Ready-to-Use - tamanho M	24mm	30	7612367082990	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0277	Kit de extração de um dia Symphony - Ready-to-Use - tamanho L	27mm	30	7612367047876	38 x 25.3 x 23.4cm
008.0278	Kit de extração de um dia Symphony - Ready-to-Use - tamanho XL	30mm	30	7612367047883	38 x 25.3 x 23.4cm

Kits de extração de utilização única estéril Symphony

Referência	Artigo	Tamanho	Quant./Caixa	GTIN	Dimensões
101047650	Kit de extração de utilização única estéril Symphony, tamanho XS	18mm	30	7612367092562	38 x 25.3 x 20.8cm
101044749	Kit de extração de utilização única estéril Symphony, tamanho S	21mm	30	7612367089128	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0397	Kit de extração de utilização única estéril Symphony, tamanho M	24mm	30	7612367084635	38 x 25.3 x 20.8cm
008.0398	Kit de extração de utilização única estéril Symphony, tamanho L	27mm	30	7612367047906	38 x 25.3 x 23.4cm
008.0399	Kit de extração de utilização única estéril Symphony, tamanho XL	30mm	30	7612367047913	38 x 25.3 x 23.4cm

* Ângulo de abertura do funil de 105° vs 90° ** Em comparação com a extração sequencial simples

Referências: 1 Sokalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567. 2 Kent JC et al. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 41(1):114-121. 3 Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442-447. 4 Muther M et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29. 5 Schlienger A et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29. 6 German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for Ready-to-Use Products (2014)