

## Dominant Flex Pompe d'aspiration chirurgicale

### ASPIRATION PUISSANTE ET FIABLE



#### **Puissante**

- Niveau d'écoulement très puissant pouvant atteindre 60 l/min associé à un fonctionnement silencieux émettant moins de 40 dB(A)\*
- Vide constant – aucune fluctuation
- Démarrage extrêmement rapide

#### **Fiable**

- Durabilité extrême
- Composants de haute qualité, fabriqués en Suisse

## Autonome, puissante et fiable : une alternative solide au vide mural

La pompe d'aspiration Dominant Flex répond à presque tous les besoins d'aspiration tant en milieu hospitalier qu'en cabinet médical. Grâce à sa classification « Cardiac Floating », elle remplit toutes les exigences de la chirurgie cardiaque. Cette pompe offre une alternative solide au vide mural, car le vide autonome empêche un trop-plein dans les dispositifs médicaux muraux et procure un niveau de vide régulier, constant et fiable. Grâce à son système à piston/cylindre résistant, son fonctionnement est robuste et silencieux. Cette pompe d'aspiration fonctionne de manière fiable pendant de nombreuses années avec des exigences d'entretien minimales et des cycles de remplacement étendus : l'investissement initial qu'elle requiert est donc rapidement amorti.

La flexibilité offerte par la pompe d'aspiration Dominant Flex permet à l'utilisateur de choisir un niveau d'écoulement élevé, intermédiaire ou bas et donc de régler le temps de formation du vide et le niveau sonore. Son niveau d'écoulement élevé et sa haute puissance d'aspiration en font également la pompe d'aspiration idéale pour la liposuction.

### Principales caractéristiques



#### Puissante ET silencieuse

- ④ Son moteur puissant et silencieux émet moins de 40 dB(A)\*.
- ⑤ Le régulateur à membrane breveté procure une formation du vide rapide.
- ⑥ La pompe Dominant Flex vous offre la liberté de choisir l'écoulement approprié.





#### Facilité d'utilisation grâce à sa conception axée sur l'utilisateur

- ⑦ Le kit de protection mécanique contre les trop-pleins protège la pompe.
- ⑧ Les éléments Clean Touch et le boîtier sans fentes ni rainures facilitent le nettoyage et minimisent le risque d'infections.
- ⑨ Une pédale marche/arrêt intégrée permet d'utiliser l'appareil en mains libres.



#### Conçue pour durer toute la vie

- ① Sa technologie robuste à piston/cylindre offre une durabilité exceptionnelle.
- ② Depuis 50 ans, Medela crée des pompes résistantes assorties d'une garantie de 5 ans sur l'intégralité du dispositif.
- ③ Les ressorts à lame brevetés minimisent l'usure mécanique.

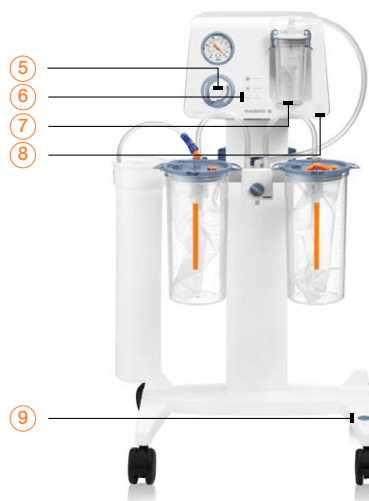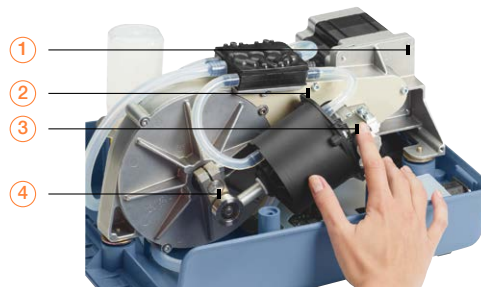

Solution d'aspiration chirurgicale d'entrée de gamme, **la pompe d'aspiration Basic de Medela** est facile à utiliser et durable grâce à sa conception unique et simplifiée (Vide élevé – 90 kPa/675 mmHg ; écoulement élevé : 30 l/min).

Pour une plus grande mobilité, des versions portables ou à **pied à roulettes** sont disponibles. Les systèmes de collecte de liquide de Medela sont un complément à la pompe d'aspiration grâce à la collecte sûre et silencieuse des liquides corporels.

\*Données archivées chez Medela AG

### Caractéristiques techniques du Dominant Flex



vide élevé  
– 95 kPa/713 mmHg



9,3 kg (version encastrable)  
20,5 lb



écoulement élevé  
40/50/60 l/min



h x l x p  
(version encastrable)  
210 x 305 x 375 mm

5 ans de garantie

Technologie d'aspiration médicale pour professionnels de santé

**Veuillez contacter votre représentant Medela local pour tout renseignement.**

 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Switzerland  
www.medela.com

**France**  
Medela France SAS  
14 rue de la Butte Cordière  
91154 Etampes Cedex  
France  
Phone +33 1 69 16 10 30  
Fax +33 1 69 16 10 32  
info@medela.fr  
www.medela.fr

**Switzerland**  
Medela AG  
Lättichstrasse 7  
6341 Baar  
Switzerland  
Phone +41 848 633 352  
Fax +41 41 562 14 42  
contact@medela.ch  
www.medela.ch

Contact local

CE 0123